

GREINER

WE DESIGN QUALITY

carryLine

carryLine

Ruhe- und Mobilisationsstühle

loungers for rest and mobilisation

de en

medbest
made in Germany

Ferti gung producti on



Entwicklung
development



CNC-Drehen
CNC lathing

WE DESIGN QUALITY

2

Alle abgebildeten Produkte wurden von Matthias Ebert, Stuttgart gestaltet.
All products shown were designed by Matthias Ebert, Stuttgart.




CNC-Zuschneiden
CNC cutting



CNC-Biegen
CNC bending



CNC-Schweißen
CNC welding

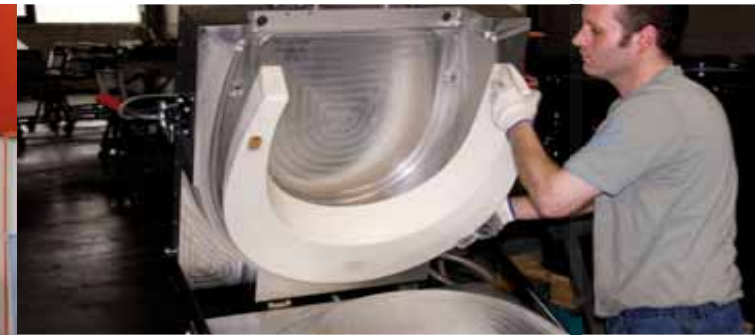

Schäumen
foaming

Made by GREINER ist Made in Germany. Auf circa 16.000 m² beweisen wir täglich im schwäbischen Pleidelsheim, dass genau dies unser Erfolgskonzept ist. Computergestützte Automatisierung hat in unseren Hallen schon lange Tradition und ist mit ein Grund für den sehr hohen Qualitätsstandard. Unsere sehr hohe Qualität in Design, Funktionalität und Technik, verbunden mit einer großen Flexibilität, die für die in vielen Arbeitsschritten hergestellte qualifizierte Handarbeit notwendig ist, macht uns zu einem Partner für anspruchsvolle und qualitätsbewusste Kunden. Am Anfang steht die Vision - in unserer eigenen Entwicklungsabteilung werden stetig neue Produkte entwickelt, die mit ihrer Innovation, ihrer gestalterischen und funktionalen Qualität und ihrer Individualität Maßstäbe setzen. Bestätigt wird unsere gleichbleibend hohe Qualität durch ein unabhängiges zertifiziertes Qualitätssicherungssystem - Greiner ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485.

Made by GREINER is Made in Germany. In the Swabian village of Pleidelsheim, on approximately 16,000 square metres, we daily prove that this is exactly our key to success. Computer aided automation has had a long tradition in our production halls and is also one reason for an extremely high quality standard. GREINER's outstanding quality in design, functionality and technology in combination with a great flexibility for integrating necessary handwork makes us a partner for demanding and quality-conscious customers. In the beginning there is a vision. We continuously develop new products, thus creating standards with respect to innovation, design, individuality and functional quality. An independent, certified quality assurance system certifies our constant high quality. GREINER is certified according to DIN EN ISO 13485.



Nähen
sewing



Polstern
upholstering



Montieren
assembling

carryLine Stühle sind die „Arbeitstiere auf Klinikgängen“, ... oder elegante Funktionsmöbel. Sie sind gleichermaßen für Personal wie Patient eine große Hilfe im Alltag. Durch das umfangreiche Zubehörprogramm ist eine individuelle Anpassung an das Einsatzgebiet möglich.

Our chairs **carryLine** are perfect for transporting patients... but also serve as an elegant piece of furniture in rooms. They are a great help for staff and patients in equal measure. With a wide range of accessories they can individually be equipped according to application.

4

carryLine mobil



carryLine mobil

Versi on mi t 300 mm Schei benräder vorne und 125 mm Lenkrol len mi t Total feststel ler hinten.

carryLine mobil

Model wi th front disc wheels of 300 mm and braked rear castors of 125 mm.

carryLine mobil hv



carryLine mobil hv

Versi on mi t 300 mm Schei benräder vorne und 125 mm Lenkrol len mi t Total feststel ler hinten.

Mi t hydraul ischer Li egehöhenverstel lung über ei nen bei dsei tig angebrachten Pumphebel .

carryLine mobil hv

Model wi th front wheels of 300 mm and braked rear castors of 125 mm, incl udi ng hydraul ic hei ght adj ustment through levers on both si des.

carryLi ne cross



carryLi ne cross

Versi on mi t 4 Rol len (Ø 125 mm) und Total feststel ler, vordere Rol len ri chtungswei send ei nstel lbar.

Di eses Fahrwerk i st auf engem Raum sehr bewegl ich!

carryLi ne cross

Model wi th 4 braked castors (Ø 125 mm), the front castors can be adjusted for safe di rectional stability. Thi s chair can easi ly be manoeuvred, even i n narrow space!

carryLi ne cross hv



carryLi ne cross hv

Versi on mi t 4 Rol len (Ø 125 mm) und Total feststel ler, vordere Rol len ri chtungswei send ei nstel lbar.

Di eses Fahrwerk i st auf engem Raum sehr bewegl ich!

Mi t hydraul i scher Li egehöhenverstell ung über ei nen bei dsei tig angebrachten Pumphebel .

carryLi ne cross hv

Model wi th 4 braked castors (Ø 125 mm), the front castors can be adjusted for safe di rectional stability. Thi s chair can easi ly be manoeuvred, even i n narrow space! Incl udi ng hydraul ic hei ght adjustment through levers on both si des.

carryLi ne fix



carryLi ne fix

Standversi on

carryLi ne fix

Stati onary versi on

carryLine technische Beschreibung

Fahrgestell/Unterteil

mobil: 300 mm Scheibenräder vorne und 125 mm Lenkrollen mit Totalfeststeller hinten (1). Die Sitz-/Liegehöhe beträgt 51 cm.

mobil hv: 300 mm Scheibenräder vorne und 125 mm Lenkrollen mit Totalfeststeller hinten (2). Hydraulische Liegehöhenverstellung über einen bei seitig angebrachten Pumphebel von 51-71 cm (6).

cross: 4 Rollen (Ø 125 mm) mit Totalfeststeller. Die beiden vorderen Doppellaufrollen lassen sich in Fahrtrichtung feststellen und stellen so den Geradeauslauf sicher (5). Die Sitz-/Liegehöhe beträgt 51 cm.

cross hv: 4 Rollen (Ø 125 mm) mit Totalfeststeller. Die beiden vorderen Doppellaufrollen lassen sich in Fahrtrichtung feststellen und stellen so den Geradeauslauf sicher (5). Hydraulische Liegehöhenverstellung über einen bei seitig angebrachten Pumphebel von 51-71 cm (6).

fix: Standversion, ohne Höhenverstellung der Sitz-/Liegefläche (4). Die Sitz-/Liegehöhe beträgt 49 cm.

Liegeflächenverstellung

manuell: Rückenlehne und Beinauflage sind synchron über eine Gasdruckfeder verstellbar bis zur Relaxposition (7). Separate manuelle Verstellung der Beinauflage um 90° ist möglich.

elektromotorisch: Über eine Handbedienung lassen sich Rückenlehne und Beinauflage synchron verstellen (8). Die elektrische Verstellung erfolgt im Akkubetrieb. Separate manuelle Verstellung der Beinauflage um 90° ist möglich.

Rückenlehne

mobil: Einteilige und hohe Rückenlehne mit ausgeprägtem Seitenhalt und ergonomisch geformtem Schubbügel (9).

cross: Hohe Rückenlehne, wahlweise einteilig mit ergonomisch geformtem Schubbügel (9), zweiteilig (10) (Kopfteil um 100° abschwenkbar und in jeder Position feststellbar) oder kurze Rückenlehne mit ausziehbarer und abnehmbarer Nackenrolle (11).

fix: Hohe Rückenlehne, wahlweise einteilig (9) oder zweiteilig (10) (Kopfteil um 100° abschwenkbar und in jeder Position feststellbar).

Schubbügel

Der ergonomisch geformte Schubbügel an der Rückenlehne ist groß dimensioniert, weich gummiert und dient zusätzlich als Stoßschutz (9).

Bei allen fahrbaren Modellen mit einteiliger Rückenlehne ist er serienmäßig mit inbegriffen. Nicht möglich bei zweiteiliger und kurzer Rückenlehne.

Armauflagen

Die Armauflagen sind aus hochwertigem und desinfektionsmittelbeständigem Integral Schaum gefertigt. Sie lassen sich nach hinten abschwanken (12) und ermöglichen einen optimalen Transfer des Patienten vom Bett in den Stuhl und zurück.

Beinauflagen und Fußstützen

Alle carryline Modelle haben eine synchron mitlaufende Beinauflage die zusätzlich separat um bis zu 90° manuell zu verstellen ist.

mobil: Wahlweise ohne Fußstütze, mit um 180° schwenkbarer Fußstütze (13) oder in der Länge verstellbarer Fußstütze (14).

cross: Wahlweise ohne Fußstütze oder mit um 180° schwenkbarer Fußstütze (13).

Reinigung

Alle Oberflächen sind auf die hygienischen Bedingungen des Klinikbetriebs ausgelegt.

Zubehör

Das umfangreiche Zubehörprogramm berücksichtigt alle Aspekte möglicher Einsatzgebiete (siehe Seite 10-11).

6

1 Fahrgestell mobil

2 Fahrgestell mobil hv

3 Fahrgestell cross/cross hv

4 feststehendes Unterteil fix

5 vordere Doppelrollen cross/cross hv mit 3 Hebelstellungen:
a) frei beweglich b) Geradeauslauf
c) Totalfeststellung

6 Verstellung der Liegehöhe: Pumphebel, bei seitig mobil hv/cross hv



chassis mobil

chassis mobil hv

chassis cross/cross hv

stationary base part fix

front double castors cross/cross hv with 3 lever positions:
a) free to move b) directional stability
c) totally blocked

adjustment of height: pump levers on both sides mobil hv/cross hv

technical information

chassis

mobil: Front disc wheels of 300 mm and braked rear castors of 125 mm (1). The seat height is 51 cm.

mobil hv: Front disc wheels of 300 mm and braked rear castors of 125 mm (2). Hydraulic height adjustment of 51-71 cm through levers on both sides (6).

cross: 4 braked castors (Ø 125 mm). The front double castors can be fixed in direction thus guaranteeing a safe directional stability (5). The seat height is 51 cm.

cross hv: 4 braked castors (Ø 125 mm). The front double castors can be fixed in direction thus guaranteeing a safe directional stability (5). Hydraulic height adjustment of 51-71 cm through levers on both sides (6).

fix: Stationary version, without height adjustment (4). The seat height is 49 cm.

adjustment of the backrest and legrest

manually: Backrest and legrest are adjustable up to a relax position through a gas spring (6). A separate manual adjustment of the legrest by 90° is possible.

elektromotive: With the help of a manual control the backrest and the legrest can synchronously be adjusted (8). The electrical adjustment is in battery operation. A separate manual adjustment of the legrest by 90° is possible.

backrests

mobil: One-part backrest with lateral side support and ergonomically shaped handle (9).

cross: Either one-part backrest with ergonomically shaped handle (9), two-part backrest (10) (heading section tiltable by 100°, can be fixed in every position), or short backrest with extendable and removable neck roll (11).

fix: High backrest, one-part or two-part (10) (heading section tiltable by 100°, can be fixed in every position).

handle

The ergonomically shaped handle fixed to the backrest is large-dimensioned, softly gummed and serves also as shock protection (8). Standard item for all chairs with one-part backrest. Not possible for two-part and short backrests.

armrests

The armrests are made of high-class disinfectant-proof integral foam. They can be tilted backwards (11), allowing a perfect transfer of the patient from his bed and back.

legrests and footrests

All carryline chairs are equipped with a synchronised legrest, including an additional hand operated, separate adjustment up to 90°.

mobil: Legrest available without footrest or with footrest, swivable by 180° (13) or adjustable in length (14).

cross: Legrest available without footrest or with footrest, swivable by 180° (13).

cleaning

All surfaces are made for the hygienic use in hospitals.

accessories

A large range of accessories makes the use of this chair versatile (see page 10-11).

7 Liegenverstellung
manuel



back- and legrest
adjustment
manually

8 Liegenverstellung
elektrisch



back- and legrest
adjustment
electrically

9 Rückenlehne
einteilig,
Schubbügel



backrest
one-part,
handle

10 zwei teilig,
abschwenkbar



two-part,
tiltable

11 kurz, verstellbar,
abnehmbar



short, adjustable,
detachable

12 Armauflagen
abschwenkbar



armrests
tiltable

13 Fußstütze
schwenkbar



footrest
swivable

14 Fußstütze
verstellbar, abnehmbar
mobil/mobil hv



footrest
adjustable, detachable
mobil/mobil hv

carryLine mobil

Fahrgestei? ohne H?henverstellung, Liegefl?che **manuell** oder **elektrisch** verstellbar
chassis **without** height adjustment, backrest and legrest **manually** or **electrically** adjustable

Grundausrstung **basic configuration**

R?ckenlehne **backrest**



einteilige R?ckenlehne
mit gummiertem Schubb?gel
**one-part backrest, handle
with gummed surface**

Fahrgestell **chassis**



mobil

nicht h?henverstellbar
not height adjustable

8

Wahlm?glichkeiten **options**

Liegefl?che **adjustment of backrest and legrest**



manuell verstellbar
manually adjustable



elektrisch verstellbar
electrically adjustable

Fu?st?tzen **footrests**



ohne Fu?st?tze
without footrest



schwenkbare Fu?st?tze
swivable footrest



Fu?st?tze in der L?nge verstellbar
(abnehmbar)
**footrest adjustable in length
(detachable)**



carryLine mobil
mit Zubeh?r Kopfpolster und
gepolsterte Armauflagen
Art.Nr. 4870200

carryLine mobil
with head bolster and upholstered
armrests as accessories
p/n 4870200

Zubeh?r Seiten **18-19**
accessories pages **18-19**



carryLine mobil

mit schwenkbarer Fußstütze und Zubehör
Kopfpolster und gepolsterte Armauflagen
Art.Nr. 4870210

carryLine mobil

with swivable footrest and accessories
head bolster and upholstered armrests
p/n 4870210



carryLine mobil Stühle überwinden mit ihren 300 mm Scheibenräder vorn und 125 mm Lenkrollen mit Totalfeststeller hinten mühelos Schiebetürführungen, Aufschwelle oder andere kleine Hindernisse des Klinikalltags. In Verbindung mit dem ergonomisch geformten Schubbügel und dem schwenkbaren Fußauftritt (optional) besitzt carryLine mobil alle Eigenschaften, welche heute an einen Transportstuhl zur Beförderung von Patienten bis zu 200 kg Körpergewicht gestellt werden. Die Armlenken lassen sich nach hinten abschwenken und ermöglichen einen seitlichen Ein- und Ausstieg in/aus dem Stuhl.

Maße dimensions

Gewicht weight	50-67 kg
Sitzbreite seat width	49 cm
Sitztiefe seat depth	50 cm
Gesamttiefe overall depth	93-103 cm
Gesamthöhe overall height	132 cm
Ø Rollen vorne Ø front castors	300 mm
Ø Rollen hinten Ø rear castors	125 mm
Sitz-/Liegehöhe seat height	49 cm
Gesamtbreite overall width	70 cm
Liegefläche (Relaxposition) surface area of the reclined chair	180 cm
Auszug ausziehbare Fußstütze extension of extendable footrest	20 cm
max. Patientengewicht max. patient weight	200 kg

Being equipped with large front disc wheels of 300 mm and braked rear castors of 125 mm, **carryLine mobil** chairs can easily be pushed over sliding door guides, lift thresholds or other barriers within a hospital. With its ergonomically shaped handle and its swivable footrest (as an accessory) carryLine mobil has all features a transport chair for patients up to 200 kg weight should have. The armrests can be folded backwards and make a sideways access and exit in/off the chair possible.

carryLine mobil hv

Fahrgestell mit Höhenverstellung, Liegefläche manuell oder elektrisch verstellbar
chassis with height adjustment, backrest and legrest manually or electrically adjustable

Grundausrüstung **basic configuration**

Rückenlehne **backrest**



einteilige Rückenlehne mit gummiertem Schubbügel
one-part backrest, handle with gummed surface

Fahrgestell **chassis**



mobil hv hydraulisch höhenverstellbar
hydraulically height adjustable

Wahlmöglichkeiten **options**

Liegefläche **adjustment of backrest and legrest**



manuell verstellbar
manually adjustable



elektrisch verstellbar
electrically adjustable

Fußstützen **footrests**



ohne Fußstütze
without footrest



schwenkbare Fußstütze
swivable footrest

10



Fußstütze in der Länge verstellbar (abnehmbar)
footrest adjustable in length (detachable)



carryLine mobil hv
Art.Nr. 4872200
carryLine mobil hv
p/n 4872200

carryLine mobil hv Stühle sind höhenverstellbar. Die Sitz-/Liegehöhe kann hydraulisch von 51 bis 71 cm verstellt werden. Mit ihren 300 mm Scheibenrädern vorn und 125 mm Lenkrollen mit Totalfeststeller hinten meistern sie mühelos Schiebetürführungen, Aufzugschwellen oder andere kleine Hindernisse des Klinikaltags. In Verbindung mit dem ergonomisch geformten Schubbügel und dem schwenkbaren Fußauftritt (optional) besitzt carryLine mobil hv alle Eigenschaften, welche heute an einen Transportstuhl zur Beförderung von Patienten bis zu 200 kg Körpergewicht gestellt werden. Die Armlehnen lassen sich nach hinten abschwenken und ermöglichen einen optimalen Transfer des Patienten vom Bett in den Stuhl und zurück.

carryLine mobil hv chairs are hydraulically adjustable in height. The height ranges from 51 to 71 cm. Being equipped with large front disc wheels of 300 mm and braked rear castors of 125 mm with, carryLine mobil chairs can easily be pushed over sliding door guides, lift thresholds or other barriers within a hospital. With its ergonomically shaped handle and its swivable footrest (as an accessory) carryLine mobil hv has all features a transport chair for patients up to 200 kg weight should have. The armrests can be folded backwards and make a perfect transfer of the patient from his bed and back possible.

carryLine mobil hv
 mit Zubehör gepolsterte Armauflagen und Kopfpolster
 Art.Nr. **4872200**
carryLine mobil hv
 with accessories upholstered armrests and head bolster
 p/n **4872200**



Maße dimensions

Gewicht weight	67-75 kg
Sitzbreite seat width	49 cm
Sitztiefe seat depth	50 cm
Gesamttiefe overall depth	93-103 cm
Gesamthöhe overall height	130-150 cm
Ø Rollen vorne Ø front castors	300 mm
Ø Rollen hinten Ø rear castors	125 mm
Sitz-/Liegehöhe seat height	51-71 cm
Gesamtbreite overall width	72 cm
Liegefläche (Relaxposition) surface area of the reclined chair	180 cm
Auszug ausziehbare Fußstütze extension of extendable footrest	20 cm
max. Patientengewicht max. patient weight	200 kg

Zubehör Seiten **18-19**
accessories pages **18-19**

carryLine cross

Fahrgestell ohne Höhenverstellung, Liegefläche manuell oder elektrisch verstellbar
chassis without height adjustment, backrest and legrest manually or electrically adjustable

Grundausrüstung **basic configuration**

Fahrgestell **chassis**



cross

nicht höhenverstellbar
not height adjustable

Wahlmöglichkeiten **options**

Rückenlehnen **backrests**



einteilige Rückenlehne
mit gummiertem Schubbügel
one-part backrest, handle
with gummed surface



zweiteilige Rückenlehne
schwenkbarer Kopfbereich
two-part backrest with
tiltable heading section



Kurze Rückenlehne mit verstell-
/abnehmbarer Nackenrolle
short backrest with adjustable/
detachable neckrest

Liegefläche **adjustment of backrest and legrest**



manuell verstellbar
manually adjustable



elektrisch verstellbar
electrically adjustable

Fußstützen **footrests**



ohne Fußstütze
without footrest

12



schwenkbare Fußstütze
swivable footrest



carryLine cross

mit einteiliger Rückenlehne und schwenkbarer Fußstütze
Art. Nr. 4880210

carryLine cross

with one-part backrest and swiveling footrest
p/n 4880210

Zubehör
accessories

Seiten
pages

18-19
18-19

Das Fahrwerk der **carryLine cross** ist auf engem Raum sehr beweglich. Die beiden vorderen Doppellaufrollen lassen sich in Fahrtrichtung feststellen und stellen so den Geradeauslauf sicher. Alle 4 Rollen haben einen Durchmesser von 125 mm und einen Totalfeststeller. Die Sitz-/Liegehöhe beträgt 51 cm. Die Armlehnen lassen sich nach hinten abschwenken und ermöglichen einen seitlichen Ein- und Ausstieg in/aus dem Stuhl.



carryLine cross
 mit zweiteiliger Rückenlehne und schwenkbarer Fußstütze
 Art. Nr. 4880212
carryLine cross
 with two-part backrest and swiveling footrest
 p/n 4880212

Maße dimensions

Gewicht weight	58-75 kg
Sitzbreite seat width	49 cm
Sitztiefe seat depth	50 cm
Gesamttiefe overall depth	88-103 cm
Gesamthöhe overall height	130 cm
Rolldurchmesser diameter of castors	125 mm
Sitz-/Liegehöhe seat height	51 cm
Gesamtbreite overall width	72 cm
Liegefläche (Reposition) surface area of the reclined chair	180 cm
max. Patientengewicht max. patient weight	200 kg

carryLine cross: This chair can easily be manoeuvred, even in narrow space. The front double castors can be fixed in direction thus guaranteeing a safe directional stability. All 4 castors have a diameter of 125 mm and a brake. The seat height is 51 cm. The armrests can be folded backwards and make a sidewise access and exit in/off the chair possible.

carryLine cross hv

Fahrgestell mit Höhenverstellung, Liegefläche manuell oder elektrisch verstellbar
chassis with height adjustment, backrest and legrest manually or electrically adjustable

Grundausstattung basic configuration

Fahrgestell chassis



cross hv
hydraulisch
höhenverstellbar
hydraulically
height adjustable

Wahlmöglichkeiten options

Rückenlehnen backrests



einteilige Rückenlehne
mit gummiertem Schubbügel
one-part backrest, handle
with gummed surface



zwei teilige Rückenlehne
schwenkbarer Kopfbereich
tiltable heading section



Kurze Rückenlehne mit verstell-
/abnehmbarer Nackenrolle
short backrest with adjustable/
detachable neckrest

Liegefläche adjustment of backrest and legrest



manuell verstellbar
manually adjustable



elektrisch verstellbar
electrically adjustable

Fußstützen footrests



ohne Fußstütze
without footrest

14



schwenkbare
Fußstütze
swiveling
footrest



carryLine cross hv
mit kurzer Rückenlehne und
verstell-/abnehmbarer Nackenrolle
Art. Nr. 4880401
carryLine cross hv
with short backrest and
adjustable/detachable neckrest
p/n 4880401

carryLine cross hv
mit Zubehör Kopfpolster
Art. Nr. 4880500
carryLine cross hv
with head bolster as accessory
p/n 4880500

Das Fahrwerk der carryLine cross hv ist auf engem Raum sehr beweglich. Die beiden vorderen Doppellaufrollen lassen sich in Fahrtrichtung feststellen und stellen so den Geradeauslauf sicher. Alle 4 Rollen haben einen Durchmesser von 125 mm und einen Totalfeststeller. Die Sitz-/Liegehöhenverstellung erfolgt hydraulisch über einen beidseitig angebrachten Pumphebel von 51-70 cm. Die Armlehnen lassen sich nach hinten abschwelen und ermöglichen einen optimalen Transfer des Patienten vom Bett in den Stuhl und zurück.

carryLine cross hv: This chair can easily be manoeuvred, even in narrow space. The front double castors can be fixed in direction thus guaranteeing a safe directional stability. All 4 castors have a diameter of 125 mm and a brake. With the help of levers on both sides the seat height can be adjusted hydraulically from 51-70 cm. Its armrests can be folded backwards and make a perfect transfer of the patient from his bed and back possible.



carryLine cross hv
 mit schwenkbarer Fußstütze
 und Zubehör Köppolster
 Art.Nr. **4880510**
carryLine cross hv
 with swiveling footrest and
 head bolster as accessory
 p/n **4880510**

Maße dimensions

Gewicht weight	67-79 kg
Sitzbreite seat width	49 cm
Sitztiefe seat depth	50 cm
Gesamttiefe overall depth	88-103 cm
Gesamthöhe overall height	130-150 cm
Röllendurchmesser diameter of castors	125 mm
Sitz-/Liegehöhe seat height	51-71 cm
Gesamtbreite overall width	72 cm
Liegefläche (Relaxposition) surface area of the reclined chair	180 cm
max. Patientengewicht max. patient weight	200 kg

15

Zubehör
accessories

Seiten
pages

18-19
18-19

carryLine fix

feststehende Modellversion, Liegefläche manuell oder elektrisch verstellbar
stationary model, backrest and legrest manually or electrically adjustable



Grundausstattung **basic configuration**

Unterteil **base part**



fix

feststehend
stationary

Wahlmöglichkeiten **options**

Rückenlehnen **backrests**



ein teilige Rückenlehne
one-part backrest



zwei teilige Rückenlehne
Schwenkbarer Kopfbereich
two-part backrest with
tiltable heading section

Liegefläche **backrest and legrest**



manuell verstellbar
manually adjustable



elektrisch verstellbar
electrically adjustable

carryLine fix
mit ein teiliger Rückenlehne
und Zubehör Kopfpolster
Art. Nr. **4870002**

carryLine fix
with one-part backrest
and head bolster as
accessory
p/n **4870002**

carryLine fix: Ob als Ruhesessel zum Sitzen oder Liegen oder als Patientenstuhl, dieser Stuhl kann in vielen Bereichen eingesetzt werden. Die zwei teilige Rückenlehne mit abschwenkbarem Kopfteil ermöglicht ein Arbeiten von hinten, beispielsweise bei neurologischen Untersuchungen wie EEG. Die Synchronverstellung der Liegefläche kann von hinten manuell über einen Trittbügel oder seitlich betätigt werden.

carryLine fix: This chair can be used in many areas, either as a relax chair, for sitting, laying or as a patient chair. With its two-part backrest and tiltable heading section surgeries from behind, such as EEGs, can easily be done. The synchronous adjustment of the backrest and legrest can be done with the help of a bail or a lateral lever.



carryLine fix
 mit zwei teiliger Rückenlehne
 und Zubehör Kopfpolster
 Art. Nr. **4870000**
carryLine fix
 with two-part backrest and
 head bolster as accessory
 p/n **4870000**

Maße dimensions

Gewicht weight	45-49 kg
Sitzbreite seat width	49 cm
Sitztiefe seat depth	50 cm
Gesamttiefe overall depth	79-103 cm
Gesamthöhe overall height	127 cm
Sitz-/Liegehöhe seat height	49 cm
Gesamtbreite overall width	66 cm
Liegefläche (Relaxposition) surface area of the reclined chair	180 cm
max. Patientengewicht max. patient weight	200 kg

carryLine Zubehör accessories

Durch ein umfangreiches Zubehörprogramm kann carryLine individuell auf die Bedürfnisse des Anwenders bzw. den Einsatzzweck angepasst werden.
With the help of a wide range of well tested accessories, carryLine can be adapted to the individual requirements of the user and the application area.

1 Kopfpolster standard,
verschiebbar und abnehmbar
head bolster standard,
movable and detachable
Art. Nr. p/n 1446900

2 Kopfpolster mit Seitenführung,
verschiebbar und abnehmbar
head bolster with lateral supports,
movable and detachable
Art. Nr. p/n 4867303

8 Stützpölster im Rückenbereich (Paar)
supporting pads, backrest (pair)
Art. Nr. p/n 4303301

9 Stützpölster im Oberschenkelbereich (Paar)
supporting pads, seat (pair)
Art. Nr. p/n 4303304



3 Armauflagen, gepolstert (Paar)
armrests, upholstered (pair)
Art. Nr. p/n 4877603

4 Seitenschutz für Armauflagen,
Edelstahl (Paar)
flank protection for armrests,
stainless steel (pair)
Art. Nr. p/n 4303209

5 Ablagekorb an der Rückenlehne
mesh basket on the backrest
Art. Nr. p/n 4303204

6 Infusionsständer, mit Halter,
höhenverstellbar
infusion bar, with holder,
height adjustable
Art. Nr. p/n 4303207

7 Beckengurt
lap belt
Art. Nr. p/n 4303205

10 Armauflage zur Blutabnahme,
mit Doppelgelenk (1 Stück)
phlebotomy armrest,
with double ball joint (1 piece)
Art. Nr. p/n 4301100

11 Halter für Blutabnahme-Armauflage (1 Stück)
holder for phlebotomy armrest (1 piece)
Art. Nr. p/n 4871400




12 Normschiene, Länge 34 cm (Paar)
standard bar, length 34 cm (pair)
Art. Nr. p/n 4870100

Urinbeutelhalter (Paar)
(ohne Abbildung)
holder for urine bag (pair)
(without picture)
Art. Nr. p/n 4871300

13 Patiententisch, Kunststoff,
desinfektionsmittelresistent,
zum Festklemmen an den Armauflagen
patient table, plastic,
disinfectant-proof,
clampable on the armrests

für standard Armauflagen
for standard armrests
Art. Nr. p/n 4462500
für gepolsterte Armauflagen
for upholstered armrests
Art. Nr. p/n 4462501

Arbeitshocker und -stühle work stools and chairs

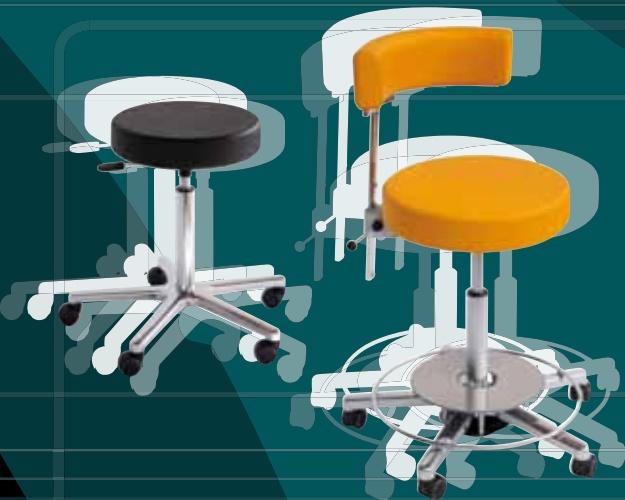

GREINER Arbeitshocker und -stühle gibt es in einer Vielzahl von Varianten, mit Hand- oder Fußauslösung der Sitzhöhenverstellung, verschiedenen Sitzkissen, Rückenlehnen und Arbeitshöhen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt **workstools**.

GREINER work stools and chairs are available in many different versions: with hand or foot release of the height adjustment, different seat cushions, backrests and seat heights. For further information please refer to our **workstools** brochure.

Greiner GmbH

Riedbachstraße 5 D-74385 Pleidelsheim
Phone +49-7144-8112-0 Fax +49-7144-8112-99
info@greiner-gmbh.de www.greiner-gmbh.de